


# B-DIAL

## SVORKA DIALYZAČNEJ FISTULY

Navrhnuté tak, aby pevne stlačilo pažu pacienta. Hladký povrch nástroja nenarušuje alebo nezhoršuje stav pokožky pacienta. Svorka umožňuje, aby bol pri primeranom tlaku na miesto vpichu dosiahnutý dostatočný tlak, s cieľom dosiahnuť účinnú hemostázu po odstránení dialyzačnej ihly. Vyrobené z vysoko kvalitného materiálu určeného pre zdravotníctvo, odolného voči chloridom, chlórnanu sodnému, chlórhexidínu a alkoholu.

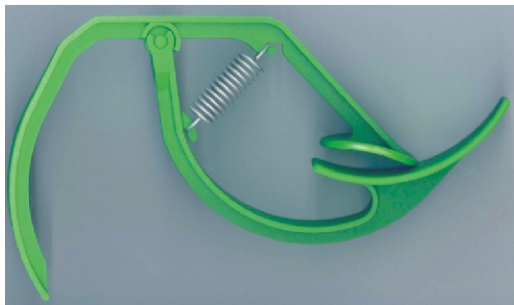

- Jednoduché použitie.
- Pružina z nerezovej ocele.
- Hladký povrch zabraňuje ťahaníu kože pacienta.
- Nastaviteľná - vhodné pre všetky veľkosti paží.
- Spodný široký klip zabezpečuje stabilitu.
- Odolná voči dezinfekčným prostriedkom.

Použitím pružiny a zmenou šírky zovretia, poskytuje upnutie väčšiu silu v hornej časti svorky. Svorku dialyzačnej fistuly je možné použiť opakovane. Pred ďalším použitím musí byť nástroj vydezinfikovaný a vysušený. Viac informácií o postupe dezinfekcie si prečítate v návode na použitie, ktorý je dodávaný s týmto výrobkom. Prístroj je určený pre použitie iba kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom.

Objednacie číslo	Popis	Balenie v kartóne
1230400663	Svorka dialyzačnej fistuly	1 / 10 ks



[www.batistmedical.sk](http://www.batistmedical.sk)

**BATIST**<sup>®</sup>  
M E D I C A L  
Part of OneMed Group

*We care*